

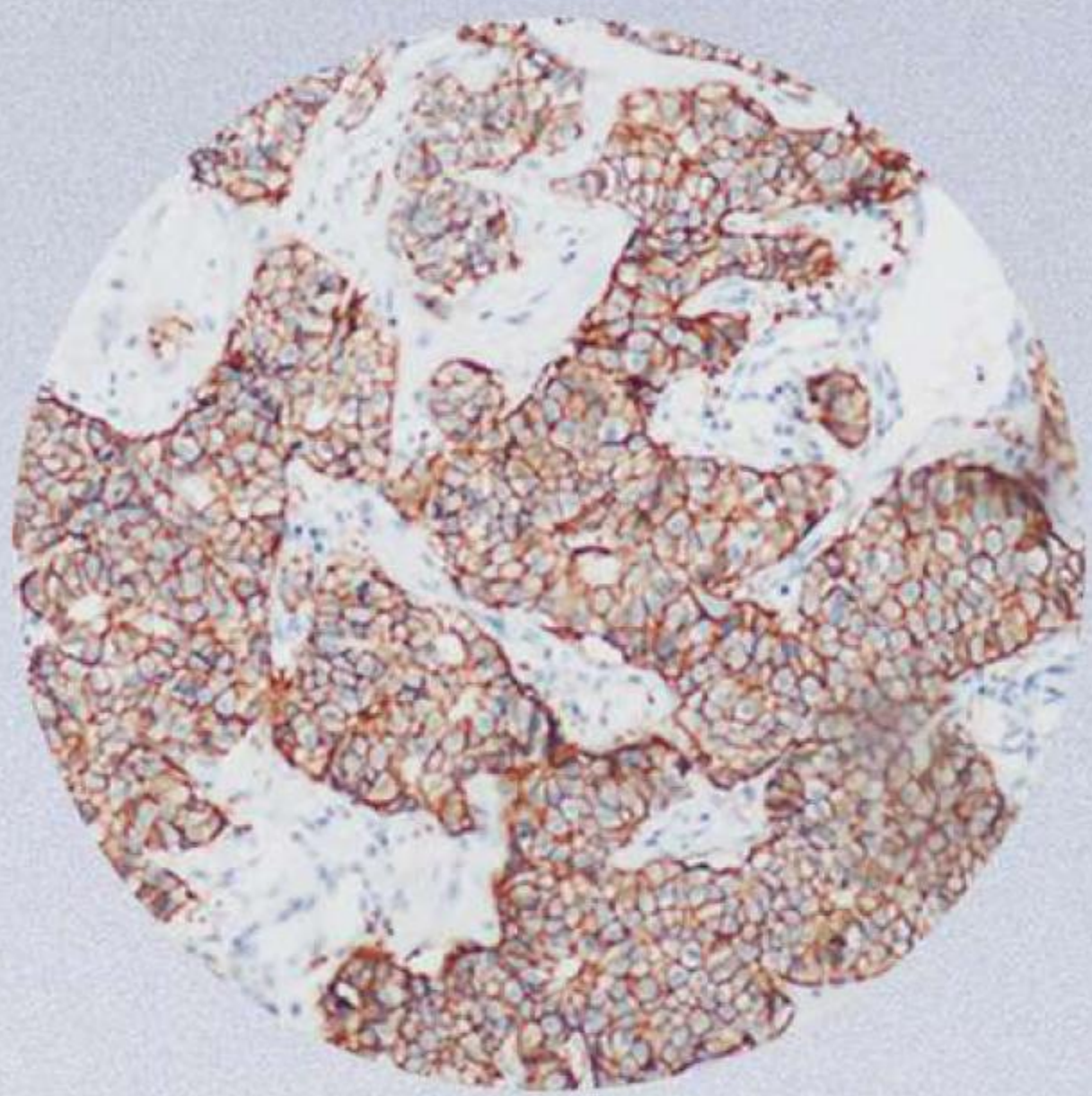


Mshot 明美

生物显微镜ML51-N

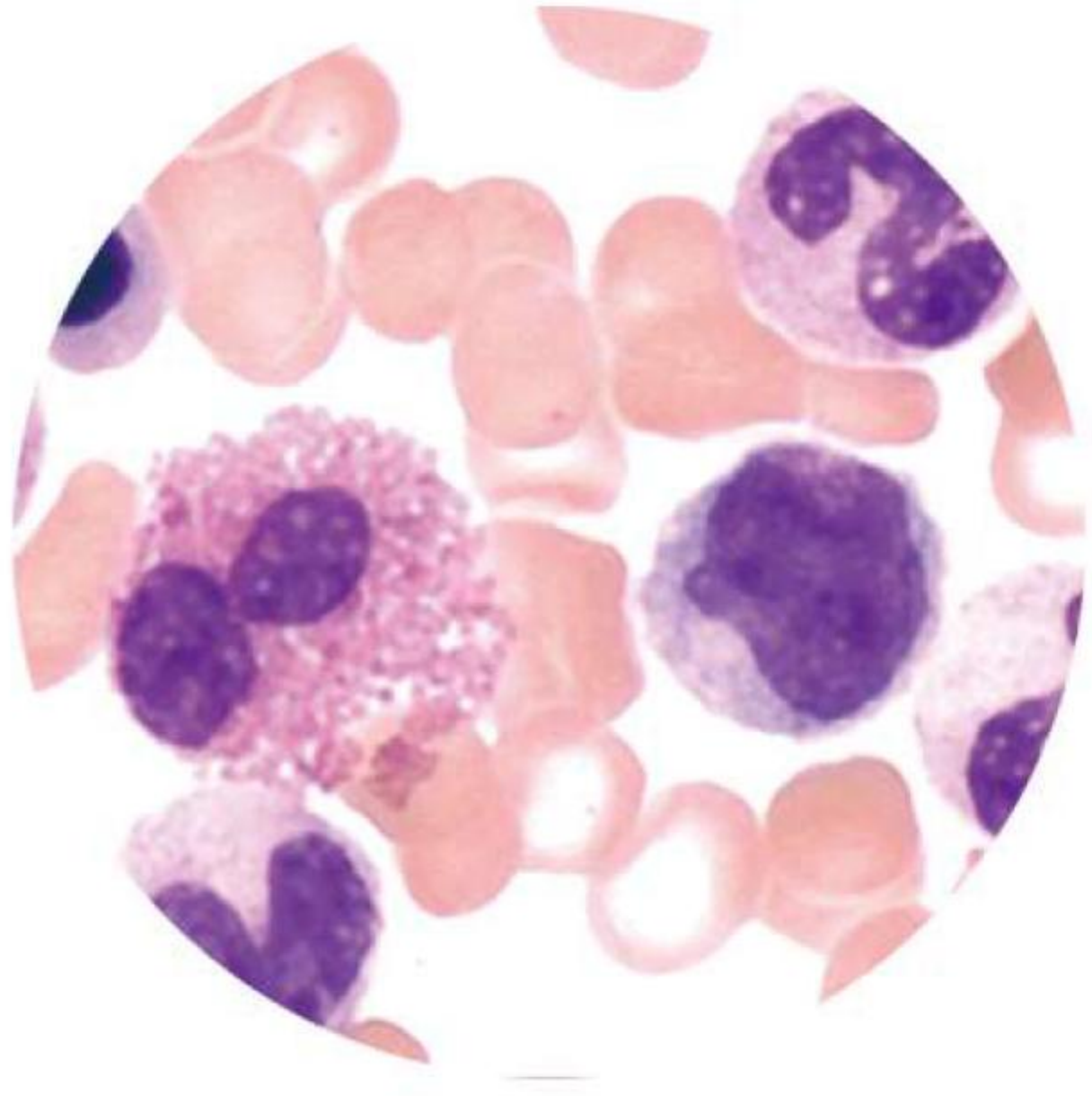

生物显微镜ML51-N

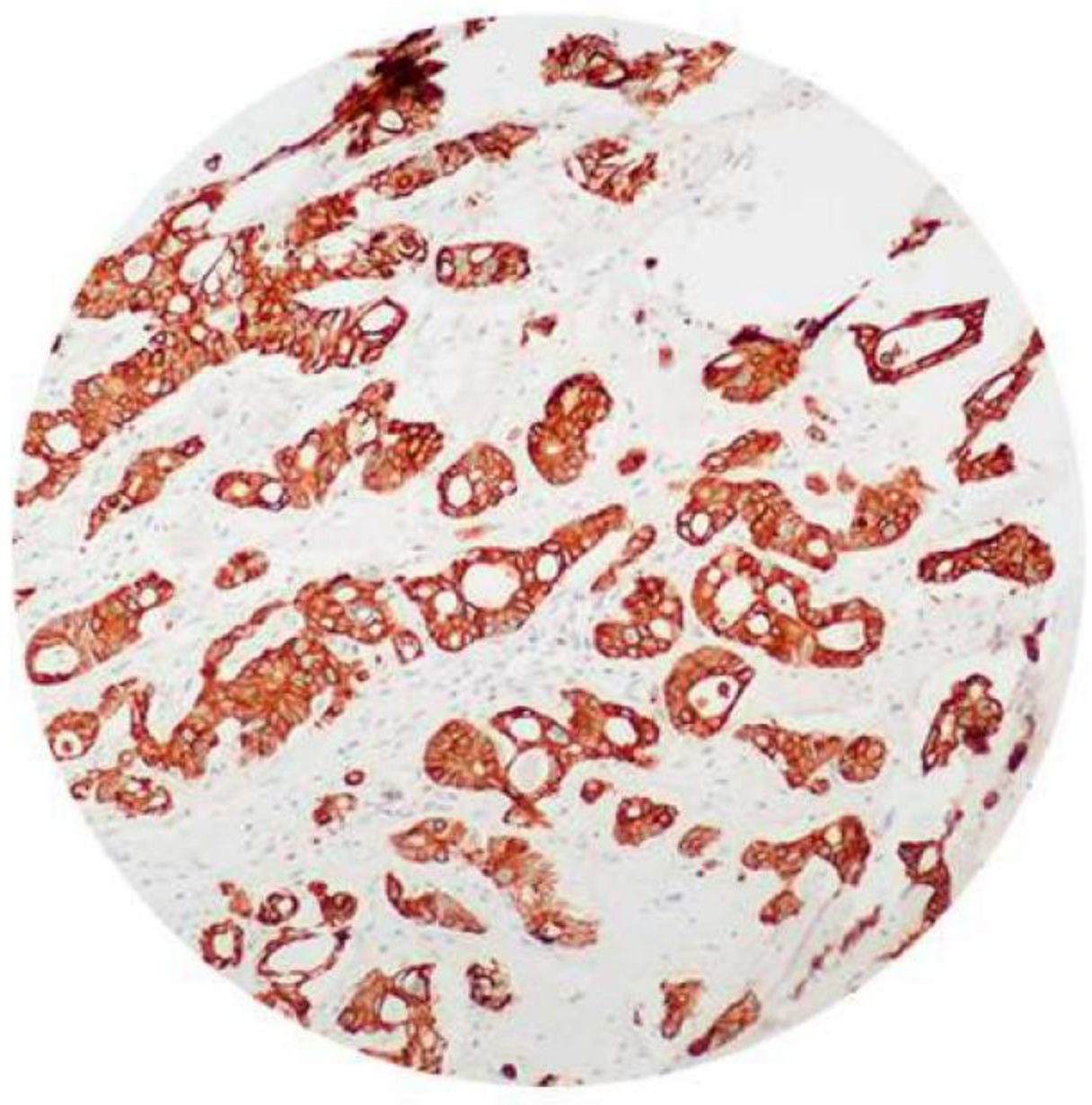

可升级成LED荧光显微镜




01大视野高眼点目镜

镜下视野更宽广，观察内容更全面；高眼点设计，无需摘眼镜也可观察；屈光度可调，保证双目镜下视野同步清晰。

02低手位陶瓷覆盖层载物台

低手位控制，手部放置在桌面即可轻松控制载物台移动，避免长时间工作时手部悬空带来的疲劳；陶瓷覆盖，抗磨损刮花，长期使用台面依旧保持平整。



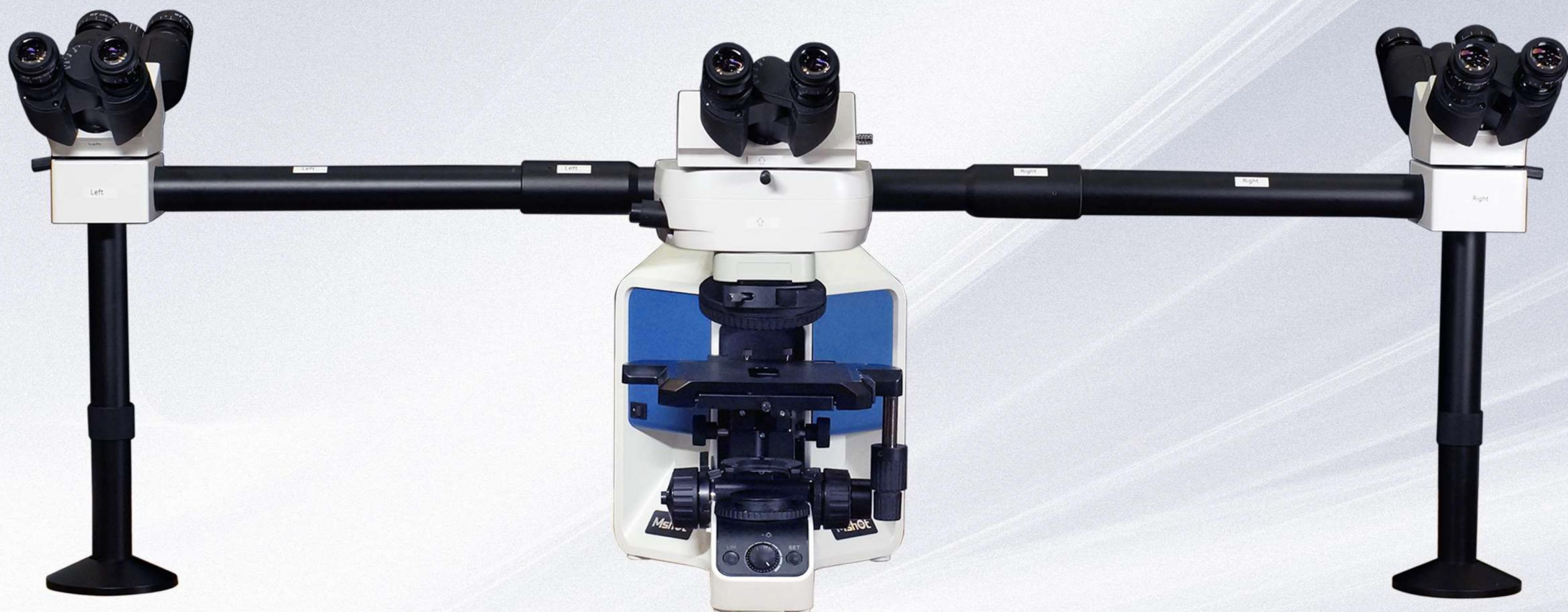

多人共览附件

03 平场半复消色差物镜

高数值孔径的半复消色差物镜,可提供高信噪比、高分辨率和高对比度的显微成像,并且能在更大视野范围内提供锐利度一致的画面。

04 带光强管理器的暖白光LED光源


长寿命高亮度暖白光LED光源,稳定均匀,明亮不刺眼,光强管理器可设置不同倍率物镜下的照明强度,来回切换时无需反复调节,时刻保持亮度一致。



ML51-N产品参数

生物显微镜ML51-N规格参数	
项目	规格
目镜	·大视野 10X/25mm ，（选配）最大可视场数可支持26.5
观察镜筒	·铰链式三目观察镜筒，高眼点， 30°倾斜，瞳距可调 ·宽场三目观察镜筒,倾角为30°，瞳距可调（选配）
平场复消色物镜	·平场半复消色差物镜 4X/10X/40X/100X ·平场消色差相衬物镜 10X/20X/40X/100X PH（可选） ·平场消色差DIC物镜（可选） ·齐焦距离45mm（选配） ·4X N.A 0.16（选配） 10X N.A0.4（选配） 20XN.A 0.8（选配） 40x NA0.95（选配）
调焦机构	·粗微动同轴调焦,调焦行程25mm，带粗调上限停止位置 粗调旋钮扭矩可调，微调刻度1 μ m
物镜转换器	·内向编码式五孔转换器
载物台	·高抗磨性陶瓷覆盖层载物台，移动范围80x50 mm，精度0.1mm
透射照明系统	·阿贝聚光镜，NA 1.1，科勒照明 ·转盘式相衬聚光镜 ·DIC聚光镜，带起偏器，带棱镜插槽 ·暖白光LED光源，亮度连续可调，带光强管理器
相机接口	·TV1XC-MO，不带相机 ·TV0.5XC-MO，不带相机
尺寸	·362 * 274.5 * 500（单位mm，长*宽*高）

ML51-N尺寸图

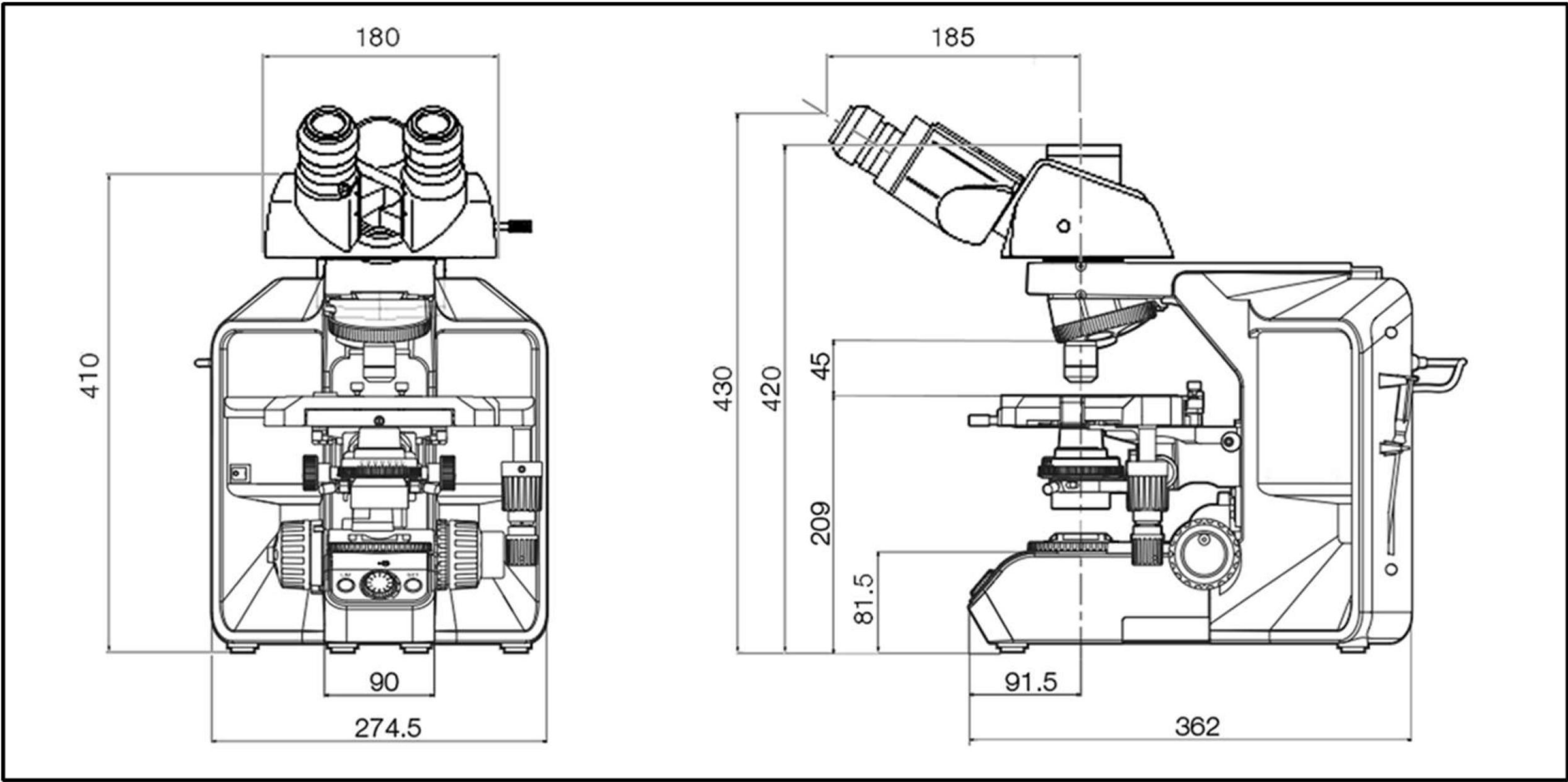

广州市明美光电技术有限公司 Guangzhou Micro-shot Optical Technology Co. Ltd

公司地址: 广州市天河区华观路1933号万科云A栋506 / 电话: 020-38250606/38262481 / QQ: 505506350
网址: www.mshot.com / 邮箱: mshot@mshot.com / 服务热线: 400-880-1910

任何规格和外观的改变，恕不另行通知。



扫码了解更多

CY250525